

KaVo Primus® 1058

Удивительное
многообразие, точно
соответствующее
Вашим потребностям.



KaVo. Dental Excellence.

Одна лечебная установка – шесть гибких вариантов, полностью соответствующих Вашим требованиям.



версия KaVo Primus 1058 TM с нижней подачей инструментов.

Подходящая система для Вашей медицинской практики.

Система KaVo Primus 1058 полностью соответствует основным видам Вашей работы и используемым помещениям. Ваша лечебная установка превосходно согласуется с Вашим индивидуальным стилем работы и с помещениями Вашей практики. Решите сами, какой вариант Вам больше подходит: модуль Cart, верхняя или нижняя подача инструментов, «гараж», или абсолютно специальные исполнения для профилактики PROPHYcenter или челюстной ортопедии ORTHOcenter.

Все эти варианты мы предлагаем, на выбор, со стандартным креслом пациента или со складывающимся креслом COMPACTchair.



балансирная версия KaVo Primus 1058 S с верхней подачей инструментов.



KaVo PROPHYcenter 1058 P.



версия «гараж» KaVo Primus 1058 G.



KaVo ORTHOcenter 1058 O.

Компактная эргономичность без компромиссов.

Занимающее мало места кресло COMPACTchair из серии KaVo Primus 1058 предлагает Вам и Вашим пациентам важные дополнительные удобства. Положение кресла плавно регулируется, и оно трансформируется из исходной сидячей позиции с наклоном 80° в требуемую лежачую позицию. Во время консультаций пациент располагается сидя, а при лечении - лежа. Усаживание в кресло COMPACTchair и вставание из него больше не представляет сложностей даже для пожилых пациентов и пациентов с ограниченной подвижностью.

Индивидуальные подголовники и спинки.

С креслом COMPACTchair Вам предлагается дифференцированная система из трех различных подголовников и двух различных спинок. Создайте максимальный комфорт – для Ваших пациентов, Ваших ассистентов и для себя. Благодаря широкому выбору Вы можете и в области головы сконфигурировать систему KaVo Primus 1058 в полном соответствии с Вашими требованиями.



Версия Cart KaVo Primus 1058 C креслом COMPACTchair.



Первоклассный вариант – для удобства Вашей работы

Все под рукой – версия KaVo Primus 1058 TM с нижней подачей инструментов.

Купив лечебную установку из серии KaVo Primus 1058, Вы будете ежедневно наслаждаться удобством работы. Пример – версия TM с нижней подачей инструментов: В любой момент все инструменты находятся у Вас под рукой – не надо тянуться, неудобно разворачиваться, нет односторонней нагрузки. Неважно, работаете ли Вы сидя или стоя и какое положение ног предпочитаете – система KaVo Primus 1058 TM каждый день, от первого пациента до последнего, гарантирует удобное, расслабленное положение тела.

Многофункциональная ножная педаль KaVo.

Мультимедийный дисплей KaVo 17"
Для удобного консультирования пациентов



Инструменты KaVo с блокиратором обратного всасывания

Система стерилизации непрерывного действия KaVo. Обеспечение качества охлаждающих жидкостей и аэрозолей

KaVo HYDROclean. Автоматическая очистка слюноотсоса водой

Съемная, поворачиваемая на 260° плевательница из фарфора (термодезинфицируемая) или стекла (моющаяся)

Поворотный, регулируемый по высоте модуль ассистента

Стол для дополнительного подноса или DIAGNOdent

Стандартная или мягкая обивка

Предлагается в стандартном варианте или как COMPACTchair

Стандартное кресло пациента: самое низкое положение 395 мм, наивысшее положение 780 мм

Кресло пациента COMPACTchair: самое низкое положение 390 мм, наивысшее положение 740 мм

VACUstopp. Прерывание функции слюноотсоса

Смещенный шарнирный узел, не возникает эффекта «выдергивания одежды»

Система стерилизации непрерывного действия KaVo. Обеспечение качества охлаждающих жидкостей и аэрозолей

Крестообразный выключатель для управления креслом пациента

Автоматически регулируемое положение кресла пациента

Предварительный выбор распыления спрея

Скоба для ношения с переключателем для аварийного отключения

Автоматически регулируемое положение кресла пациента

Струя воздуха

Предварительная установка левого вращения мотора

Педаль включения инструментов и регулирования числа оборотов/интенсивности вращения. Функция неподвижного изображения, обеспечиваемая KaVo CCC.

— Функции только при вынутых инструментах

— Функции только при вложенных инструментах

Многофункциональная ножная педаль KaVo для не требующих усилий управления и настройки функций инструментов, а также положений кресла.

Интраоральная камера ERGOcam 4

Моторы KaVo INTRAmatic LUX. Прочные, надежные и предельно тихие

Поворотная крышка центра установки

Еще больше заказных версий – точно в соответствии с Вашими требованиями.

Абсолютная гибкость – версия Cart KaVo Primus 1058 C.

В зависимости от Ваших потребностей, мы предлагаем систему Primus 1058 и в виде версии с регулируемым по высоте модулем Cart. Он придает еще больше мобильности Вашему рабочему месту. С версией Primus 1058 Cart Вы работаете эргономично даже в небольшом помещении.



Экономия места – версия «гараж» KaVo Primus 1058 G.

Если для Вас особо важна экономия места, версия «гараж» системы Primus 1058 может стать оптимальным выбором для Вашей практики. Если в данный момент Вам не требуется модуль врача, Вы можете установить его в «гараж». У Вас все под рукой – и в тоже время Вы можете мгновенно все убрать – версия «гараж» всегда обеспечит нужное свободное место.



Эффективность – балансирная версия KaVo Primus 1058 S с верхней подачей инструментов.

В системе KaVo Primus 1058 S инструменты уже находятся в том положении, в котором Вы затем держите их в руке – вращение руки при взятии инструмента больше не требуется. Кроме того, благодаря балансирной концепции Вам больше не требуется компенсировать натяжение шланга инструмента. Инструменты лежат в руке ощутимо более сбалансировано.

Благодаря тому, что шланги инструментов всегда убраны, они лучше защищены от загрязнения – что означает еще большее повышение гигиены в Вашей практике. Кроме того, в связи с тем, что шланги расположены далеко от пола, обеспечивается полная свобода передвижения: пациентам – при вставании и усаживании, Вам – во время работы, а Вашим сотрудникам – при уборке практики.



Профессиональная профилактика – поле деятельности с превосходными перспективами.

Довольные пациенты с радостью приходят чаще.

Система KaVo PROPHYcenter 1058 P претворяет в жизнь ожидания пациентов на самое лучшее обслуживание – благодаря превосходному профилактическому и контрольному уходу за зубами. Желание иметь красивые, здоровые зубы не в последнюю очередь все чаще ведет пациентов в специализированные стоматологические практики.

Создано специально для профилактики.

Благодаря KaVo PROPHYcenter 1058 P Вы пользуетесь всеми качественными и экономическими преимуществами серии KaVo Primus 1058. Кроме того, мы оснащаем PROPHYcenter индивидуально и точно по Вашим требованиям дополнительными компонентами: KaVo DIAGNOdent для раннего распознавания кариеса, KaVo PROPHYflex для профессиональной чистки зубов, зеркалом на рабочем светильнике и т. п. Таким образом, Вы получаете согласованные друг с другом компоненты и извлекаете выгоду от продуманной концепции профилактики от KaVo.



Исчерпывающая профилактика – специализированная на челюстной ортопедии.

Индивидуальное экспертное оснащение.

У ондатологов особые требования к лечебным установкам. Система KaVo ORTHOcenter 1058 O наилучшим образом выполняет их. Она предлагает дополнительные возможности укладки мелких частей и ручных инструментов, а также имеет эргономично расположенный держатель щипцов. По желанию, Вы можете получить ORTHOcenter даже без плевательницы – еще один, особый фактор повышения гигиены для Вас и Ваших пациентов.

Все преимущества включены.

Купив KaVo ORTHOcenter 1058 O, Вы пользуетесь всеми преимуществами серии Primus 1058. Что это означает? Превосходный дизайн, продуманная эргономичность, кратчайшие траектории манипуляций, высочайшее качество и длительный срок службы всех компонентов, поразительная эффективность инвестиций при покупке и эксплуатации.



Новый индивидуальный облик Вашей практики – с многочисленными вариантами дизайна и покраски.

Многочисленные варианты комбинирования.

Выберите для Вашей системы KaVo Primus 1058 из 15 цветов лакокрасочного покрытия и 11 цветов обивки комбинацию, которая придаст индивидуальную нотку помещениям Вашей практики. Цветовая палитра разработана таким образом, что все цвета гармонируют друг с другом.

Цвета лакокрасочного покрытия



Цвета обивки



Соответствие обстановке в Вашей практике.

Благодаря системе KaVo Primus 1058 Вы можете целенаправленно расставить четкие акценты в Ваших помещениях. В этом вам поможет широкая цветовая палитра. Кроме того, Вы можете выбрать один из наших специальных дизайнов корпуса аппарата.

Продуманный дизайн.

При разработке системы KaVo Primus 1058 важнейшую роль играли аспекты удобства и экономичности, а также различные требования стоматолога, ассистента и пациента. Благодаря этому компании KaVo удалось создать уникальный язык форм, объединяющий в себе высочайшую эргономичность, поразительную экономичность и привлекательный дизайн. Таким образом, он следует строжайшим критериям качества от KaVo. Кроме того, при разработке KaVo Primus 1058 большое внимание уделялось экономии места и четкой дифференциации отдельных компонентов.

„red dot design award“.

26 членов международного жюри из девяти стран мира присудили компании KaVo премию за превосходный дизайн системы Primus 1058. Это одна из важнейших в мире премий дизайнерам, присуждаемая ежегодно и за которую год за годом упорно борются многочисленные компании.

К критериям оценки продукции относятся, прежде всего, уровень инноваций, функциональность, качество, эргономичность и экологическая совместимость.



Дизайн – Ваши преимущества:

- Широкая цветовая палитра для индивидуальной адаптации к Вашим помещениям
- Красивое оформление практики
- Функциональные формы
- Превосходный дизайн

Освежающе иной – новый дизайн Primus® 1058.

Новые идеи для Вашей практики.

Пациенты хотят чувствовать себя комфортно – Вы и Ваши сотрудники тоже. Подходящую атмосферу Вы можете сейчас создать благодаря различным исполнениям Вашей системы KaVo Primus 1058. Сразу же бросающаяся в глаза система будет способствовать укреплению Вашего имиджа у пациентов. Создайте рабочую атмосферу, в которой все чувствуют себя хорошо: пациенты, Ваши ассистенты и Вы. Design Edition – это символ актуальности и прогресса, важный фактор завоевания доверия пациентов.

Вызовите прекрасные чувства.

Различными цветами и исполнениями системы Вы подчеркиваете особое настроение Вашей практики – расслабляющее, освежающее или стимулирующее. Выберите исполнение (Edition), соответствующее Вашему характеру.



Edition «Серебристый»



Edition «Пурпурный»



Edition «Оранжевый»



Edition «Зеленый»



Edition «Синий»

Пусть в практике всегда будет лето!



Визуальная привлекательность – для Вашей современной практики.

Качество во всех деталях.

В исполнениях Design Edition Вашей системы KaVo Primus 1058 лакированные компоненты корпуса системы и модуля пациента, а также поверхность модуля врача имеют специальный дизайн. Качество всех лакированных компонентов проверено, они обладают стойкостью к УФ-излучению и дезинфицирующим средствам.



Свежий – KaVo Primus 1058 T Design Edition «Зеленый».



Стимулирующий – KaVo Primus 1058 T Design Edition «Пурпурный».



Вдохновляющий – KaVo Primus 1058 T Design Edition «Синий».



Расслабляющий – KaVo Primus 1058 T Design Edition «Серебристый».



Привлекательный – KaVo Primus 1058 T Design Edition «Оранжевый».

Каждый день приятная работа – комфортность при любом лечении.

Идеальные условия работы для защиты Вашего здоровья.

Купив систему KaVo Primus 1058, Вы станете обладателем рабочего места, адаптирующегося к Вашим требованиям. Таким образом, лечебная установка вносит важный вклад в защиту Вашего здоровья. Разумеется, эргономическую конструкцию имеют не только отдельные компоненты системы KaVo Primus 1058, но и их взаимодействие. Таким образом, обеспечивается эффективный и естественный рабочий процесс при каждом лечении. Благодаря естественному положению тела Вы гораздо меньше устаете в течение рабочего дня. Так, например, благодаря узкой плечевой части кресла пациента и тонкой спинке обеспечивается лучший доступ к пациенту.

Комфорт и для Вашего ассистента.

Модуль ассистента Вашей системы KaVo Primus 1058 выполнен поворотным и регулируемым по высоте. Благодаря этому ассистент может помогать Вам, сохраняя удобное положение тела. Но Вы играючи справляетесь со своей работой, даже если работаете один.

Поддержка благодаря многофункциональной ножной педали KaVo.

Ваши руки остаются свободными, позволяя сконцентрироваться на работе в полости рта. Вы управляете ножной педалью функциями инструментов – скоростью вращения, выбором аэрозоля, воздухом и направлением вращения мотора, - а также важнейшими функциями кресла: положением усаживания, вставания и полоскания рта, лечения верхней и нижней челюсти и т. п. Так как благодаря ножной педали не требуется касание клавиатуры модуля врача загрязненными руками, значительно повышается уровень гигиены при лечении.

Все пациенты могут теперь чувствовать себя комфортно.

Для того, чтобы пациенты удобно лежали, а Вы имели оптимальный доступ ко рту, Вы можете отрегулировать кресло пациента в зависимости от роста пациента и ситуации проведения лечения. Благодаря устройству подъема сиденья KaVo Вы можете настроить систему в соответствии с физическими данными пациента. Благодаря системе KaVo Primus 1058 пациенты не подвергаются эффекту «выдергивания одежды», у них не затекают руки и ноги, не прогибается излишне позвоночник – они наслаждаются предельно удобным положением. Для лечения детей Вы можете быстро установить сиденье в абсолютно горизонтальное положение.



Как будто паришь в облаках.

Имеющее эргономическую форму кресло предлагает пациентам повышенный комфорт. Как дети, так и взрослые пациенты очень удобно лежат в нем. Удобная, особенно мягкая обивка имеет эргономическое углубление для сиденья и встроенную систему поддержки лордоза.



Ощутимая эргономичность – Ваши преимущества:

- Расслабленное рабочее положение
- Все находится в зоне прямого доступа
- Все под контролем благодаря многофункциональной ножной педали KaVo
- Гибкое размещение пациента
- Особенно мягкая обивка с эргономическим углублением для сиденья и встроенной системой поддержки лордоза
- Сконцентрированная работа благодаря спокойствию пациента



Гигиеническая безопасность – для врача, ассистента и пациента.

Образцово чистая работа.

Ваша система KaVo Primus 1058 предлагает Вам широкий спектр гигиенических функций, обеспечивающих повседневную безопасность в Вашей практике. Гигиеническая функция HYDROclean автоматически промывает внутренние шланги отсоса, система стерилизации непрерывного действия*, используя средство KaVo OXYGENAL, непрерывно уменьшает количество водорослей и микроорганизмов. Во время длительных перерывов в работе дополнительная функция интенсивной стерилизации обеспечивает оптимальную гигиену. Благодаря этому Вы значительно снижаете риск перекрестного заражения.

*Только в сочетании с водяным блоком DVGW


Значительная экономия времени для Ваших сотрудников.

Гигиена Вашей системы KaVo Primus 1058 начинается на ее поверхности: в целях очистки Вы можете просто снять защитные кожухи и ручки Вашей системы. Фарфоровую чашу плевательницы также можно легко и просто снять в целях ее дезинфекции.



Простая и легкая очистка фильтровальной системы.

Для очистки в распоряжении ассистента имеется гигиеническая ручка, с помощью которой обеспечивается простая и гигиеничная замена всасывающего фильтра. Благодаря наклонной шахте фильтра дополнительно снижается опасность заражения Ваших сотрудников.

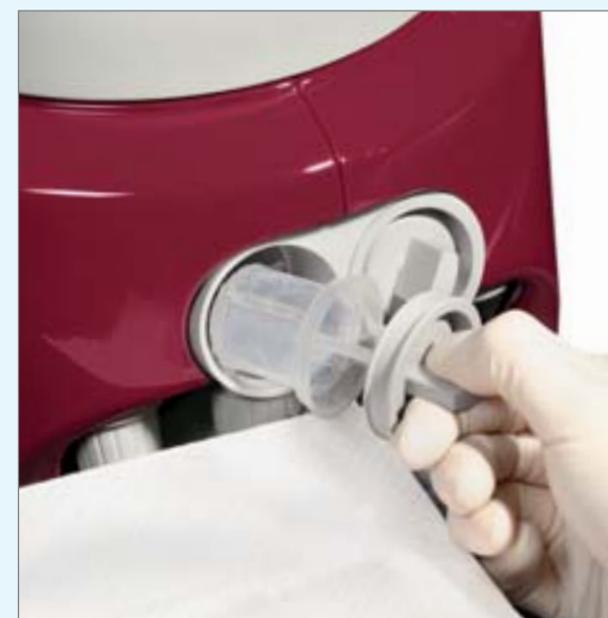

Улучшенная защита благодаря блокиратору обратного всасывания.

Система подачи воды защищается блокиратором обратного всасывания KaVo на инструментах и моторах KaVo. Он защищает пациентов и предотвращает всасывание загрязненной воды в лечебную установку.

Экономящая время гигиена – Ваши преимущества:

- Строжайший стандарт гигиены (согласно Robert Koch-Institut)
- Автоматизированные гигиенические функции для уменьшения затрат времени на обеспечение гигиены
- Функция HYDROclean предотвращает коагуляцию белка во внутренних всасывающих линиях
- Система стерилизации непрерывного действия и интенсивная стерилизация для постоянного уменьшения количества водорослей и микроорганизмов
- Съёмные части ускоряют и повышают гигиеническую чистоту
- Безопасность для врача, ассистента и пациента
- Эффективная защита от перекрестного заражения



Профессионализм для любых практик – защита инвестиций, эффективность и высочайшее качество.

Надежная лечебная установка для новичков и профессионалов.

Система KaVo PRIMUS 1058 наилучшим образом зарекомендовала себя у стоматологов различных специализаций. Около 20000 этих успешных систем подтверждают на деле свои образцовые возможности. Неважно, организовали ли Вы свою первую практику или после многих лет работы решились сменить оборудование: Купив систему KaVo Primus 1058, Вы всегда выигрываете от ее поразительной надежности при одновременной эффективности инвестиций.

KaVo Primus 1058 поразит Вас – независимо от того, в пользу какого варианта Вы решите.

Защита инвестиций и высочайшая отказоустойчивость


Все компоненты Вашей системы KaVo Primus 1058 рассчитаны на высочайшую функциональность, максимальные нагрузки и длительный срок службы. Все подвижные части обладают легкостью хода и остаются стабильными даже через много лет. Система сконструирована таким образом, что позднее Вы можете до- или переоснастить ее, например, если меняете свою специализацию.

Современная лечебная установка с German Engineering.

Компания KaVo уже много лет известна своими инновационными решениями во всех областях стоматологического оборудования – и высочайшим качеством своей продукции. Все компоненты проходят фазы интеллектуального планирования, высококачественного изготовления и неустанного усовершенствования. Постоянный контроль и обеспечение качества обеспечивают высокую надежность и оптимальную защиту инвестиций. Вы можете полностью положиться на фирму KaVo и ее продукцию.

Высококачественные материалы обеспечивают высочайшую надежность и безопасность.

Массивные, выполненные из металла рычажные системы, блестящие лакированные поверхности и стерилизуемые пластиковые ручки – вот только три примера интеллектуального выбора материалов в продукции KaVo. Система KaVo Primus 1058, ее приводы и все принадлежности отличаются чрезвычайно длительным сроком службы и работают предельно точно и экономично.

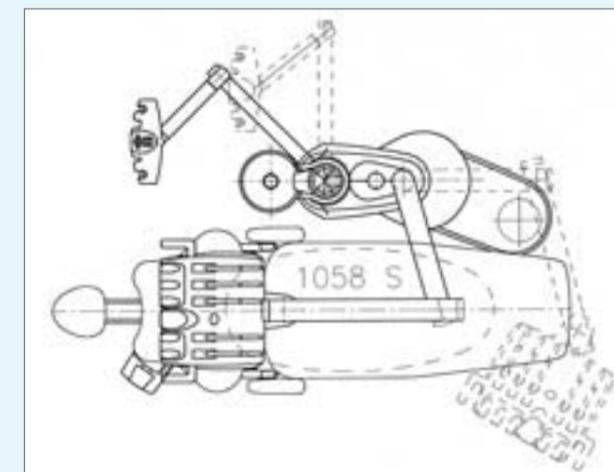

С самого начала превосходно продумано - горизонтальная проекция системы KaVo Primus 1058 S.

Экономия и многообразие – Ваши преимущества:

- Экономичное приобретение
- Экономичная эксплуатация
- Высокая отказоустойчивость и длительный срок службы
- Экономящие время процессы
- Высокая интегрируемость и возможность создания комбинаций из стандартных узлов
- Широкая палитра моделей для различных концепций
- Перспективные системы


Индивидуальный подход – опции и дополнительное оснащение.



KaVo Metospeed.
Сохранение в памяти параметров числа оборотов в зависимости от показаний к лечению на трех уровнях для двух пользователей. Индикатор показаний таймера и часов с подсветкой.



Ручки KaVo (1058 S + KAVO-LUX 1410 B).
Съемные, опционально термодезинфицируемые.

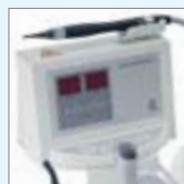

Модуль ассистента KaVo.
С держателем для DIAGNOdent.



Малый негатоскоп.
5 x 5 cm



Панорамный негатоскоп.
Располагается на модуле врача или на сервисном столике.




Мягкая обивка.
С эргономическим углублением для сиденья и встроенной системой поддержки лордоза.



ERGOcam light + ERGOcam 4.
Встроенная в корпус установочная мультимедийная система для консультирования пациентов.



Светодиодный полимеризационный наконечник.

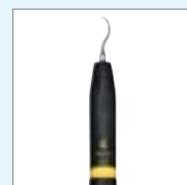

KaVo PIEZOlux.
Для тщательного удаления зубного камня.



Подключение для аппаратов других производителей.
Простое снабжение дополнительных аппаратов водой, воздухом и электроэнергией.



KAVOSUN 1415.
Регулировка многопозиционными переключателями в диапазоне от 8000 до 15000 люкс.



KAVOLUX 1410.
Плавная регулировка в диапазоне от 8000 до 30000 люкс.



KaVo Centro 1540.
Несущая система для универсального применения.



KaVo Physio 5007.
Регулировка высоты сиденья, на выбор, ручным или ножным управлением.



Детское сиденье
Для оптимального размещения ребенка ростом примерно до 150 см.

	TM	S	Cart	G	O	P
Кресло пациента	●	●	●	●	●	●
Съемное сиденье	●	●	●	●	●	● ¹⁾
VACUstopp	●	●	●	●	●	●
Стандарт	X	X	X	X	X	X
COMPACTchair	X	X	X	X	X	X
Стандартная обивка	X	X	X	X	X	X
Мягкая обивка	X	X	X	X	X	X ¹⁾
Спинка кресла	●	●	●	●	●	●
Comfort	X	X	X	X	X	X ²⁾
Progress	X	X	X	X	X	X
Подголовник	●	●	●	●	●	●
Стандарт	X	X	X	X	X	X
Двухшарнирный	X	X	X	X	X	X ²⁾
SOMATIC	X	X	X	X	X	X ²⁾
Подлокотник						
Справа	●	●	●	●	●	● ³⁾
Слева	●	●	●	●	●	● ³⁾
Модуль врача	●	●	●	●	—	●
1. Шланг турбины	●	●	●	●	—	●
1. Мотор LUX K 200	X	X	X	X	—	●
1. Мотор LUX KL 701	X	X	X	X	—	—
Трехфункциональный шприц или многофункциональный шприц	○	○	○	○	—	○
2. Мотор LUX K 200	○	○	○	○	—	○
2. Мотор LUX KL 701	○	○	○	○	—	—
2. Шланг турбины	○	○	○	○	—	○
ZEG PIEZOlux	○	○	○	○	—	○
Метосpeed-сохранение в памяти параметров числа оборотов	○	○	○	○	—	○ ⁴⁾
Малый негатоскоп	○	○	○	○	—	○ ⁴⁾
Панорамный негатоскоп	○	○	○	○	○	○ ⁴⁾
Адаптер панорамного негатоскопа	○	○	○	○	○	○ ⁴⁾
Держатель для US-подноса	X	X	X	X	—	—
Держатель для 1 стандартного подноса	X	—	X	X	—	X
Держатель для 2 стандартного подноса	○	○	—	—	—	X
Устройство подогрева спрея инструментов	○	○	○	○	○	○
Физиологический раствор хлористого натрия	○	—	○	—	—	— ⁴⁾
Кабельная проводка для ERGOcam 3a	○	○	●	●	—	○
Адапция ERGOcam 4a	○	○	○	○	—	○
Встраивание ERGOcam 4i	○	○	○	○	—	○
Модуль ассистента	●	●	●	●	●	●
с джойстиком	—	—	—	—	—	●
с модулем управления Comfort	●	●	●	●	●	—
Пневмомотор 181 M	—	—	—	—	●	—
Шланг турбины	—	—	—	—	●	—
Отсос спрея	●	●	●	●	●	●
Слюноотсос	●	●	●	●	●	●

	TM	S	Cart	G	O	P
2. Слюноотсос	○	○	○	○	—	○
Трехфункциональный шприц или многофункциональный шприц	○	○	○	○	○	○
Светодиодный полимеризационный наконечник	○	○	○	○	○	○
Держатель для 1 стандартного подноса	○	○	○	○	○	○
Кронштейн держателя для подносов или кронштейн держателя для DIAGNOdent	○	○	○	○	○	○
Регулируемый по высоте кронштейн модуля ассистента	●	●	●	●	●	●
Направляющее устройство для шлангов отсоса	○	○	○	○	○	○
Регулировка отсоса при центральной системе аспирации.	○	○	○	○	○	○
Корпус установки						
Фарфоровая чаша плевательницы	X	X	X	X	○	X
Стеклянная чаша плевательницы	X	X	X	X	○	X
Система стерилизации длительного действия	●	●	●	●	●	● ⁵⁾
Интенсивная стерилизация	○	○	○	○	—	—
Hydroclean (система гидроочистки)	●	●	●	●	●	●
Бойлер для подогрева воды	○	○	○	○	○	○
Система подачи рабочих сред	●	●	●	●	●	●
Водяной блок DVGW	X	X	X	X	X	X
Водяной блок, компактный	X	X	X	X	X	X
Емкость для воды DVGW	X	X	X	X	—	—
Вакуум-регулятор	○	○	○	○	○	○
Подключение для дополнительных аппаратов	○	○	○	○	○	○
Система аспирации	●	●	●	●	●	●
Система внешнего отсоса	X	X	X	X	X	X
Амальгамоотделитель Dürr	X	X	X	X	○	○
Автоматический сепаратор Dürr	X	X	X	X	X	X
Амальгамоотделитель Metasys	X	X	X	X	○	○
Автоматический сепаратор Metasys	X	X	X	X	X	X
Сборник твердых частиц	X	X	X	X	X	X
Прочее						
Светильник KAVOLUX 1410 B	○	○	○	○	○	○
Светильник KAVOSUN 1415 C	○	○	○	○	○	○
Увеличительное зеркало для рабочего светильника	○	○	○	○	○	○
Стойка светильника	○	○	○	○	○	○
Сервисный комплект для пациента	○	○	○	○	○	○
Сервисный столик 1568	—	—	○	○	●	—
ERGOcam light	○	○	○	○	○	○
Интегр. рентген. системы In eXam	○	○	○	○	○	○
Базовый комплект DEKASEPTOL	●	●	●	●	●	●

● Серийное оснащение ○ Опциональное оснащение
X Нужно выбрать — Не поставляется
¹⁾ Не предлагается в сочетании с креслом пациента COMPACTchair.
²⁾ Только в сочетании с креслом пациента COMPACTchair.
³⁾ Опционально в сочетании с креслом пациента COMPACTchair.
⁴⁾ Не подходит при расположении под столешницей («гараж»).
⁵⁾ Только в сочетании с водяным блоком DVGW или емкостью для воды DVGW.

KaVo Primus® 1058

Mat.-Nr. 1.004.7234.06/08 pl Мы оставляем за собой право вносить технические изменения. Незначительные изменения цвета обусловлены техникой печати. © Copyright KaVo Dental GmbH.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH · D 88400 Biberach/Riss · Телефон +49 7351 56-0 · Факс +49 7351 56-1488 · www.kavo.com